

Root ZX mini è compatto per essere tenuto facilmente nella mano.

Che sia posizionato su un vassoio, su un tavolo o altrove, le dimensioni compatte del Root ZX mini permettono un utilizzo facile e comodo.



Sviluppato e prodotto da
J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto 612-8533, Japan
T +81. (0)75. 611 2141, F +81. (0)75. 622 4595

Morita Global Website
www.morita.com

Distribuito da
J. MORITA CORP.
3-33-18 Tarumi-cho, Suita-shi, Osaka 564-8650, Japan
T +81. (0)6. 6380 1521, F +81. (0)6. 6380 0585

J. MORITA USA, INC.
9 Mason, Irvine CA 92618, USA
T +1. 949. 581 9600, F +1. 949. 581 8811

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Strasse 27b, 63128 Dietzenbach, Germany
T +49. (0)6074. 836 0, F +49. (0)6074. 836 299

MORITA DENTAL ASIA PTE. LTD.
150 Kampong Ampat
#06-01A KA Centre, Singapore 368324
T +65. 6779. 4795, F +65. 6777. 2279

J. MORITA CORP. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Suite 2.05, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia
T +61. (0)2. 9667 3555, F +61. (0)2. 9667 3577

J. MORITA CORP. MIDDLE EAST
4 Tag Al Roasaa, Apartment 902, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt
T +20. (0)3. 58 222 94, F +20. (0)3. 58 222 96

J. MORITA CORP. INDIA
Felix Office No.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints, Bhandup (West), Mumbai 400078, India

J. MORITA MFG. CORP INDONESIA
28F, DBS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
T +62-21-2988-8332, F + 62-21-2988-8201

SIAMDENT CO., LTD.
71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130, Thailand
T +66. 38. 573042, F +66. 38. 573043
www.siamdent.com

Con riserva di modifi che tecniche ed errori. Stampato in Germania.
Pub. No. ES616-B108-IT-1 JME IT 1121 *0.75

Apparecchi per diagnostica e imaging



Riuniti dentali



Manipoli e strumenti



Sistemi endodontici



Sistemi laser



Apparecchiature per laboratorio



Sistemi Educativi e Training



Prodotti Complementari



Root ZX mini



Assistenza Tecnica e Commerciale

J. Morita Italia
Mc3 Communication
Via XXV Aprile 41, 20091 Bresso
T +39. 02. 873 945 32
F +39. 02. 873 945 32
mc3com@hotmail.it
www.jmoritaitalia.com

Thinking ahead. Focused on life.

Compatto e preciso

Da oltre 30 Anni la referenza tra i rilevatori apicali

Il Root ZX mini utilizza la stessa tecnologia collaudata su cui gli Endodontisti fanno affidamento da oltre 30 anni. Questa tecnologia consolidata è stata valutata con un'affidabilità del 97,5%.*



Accurato – Misure di alta precisione

Utilizzando la tecnica delle frequenze, Root ZX mini indica in modo molto preciso la posizione della lima. La misura non viene influenzata dalla presenza o l'assenza di sangue, elettroliti, soluzione salina, acqua o acqua ossigenata.

Semplice – nessuna calibrazione

Non è necessaria alcuna taratura prima della misurazione di ciascun canale.



Compatto

La calibratura automatica garantisce una grande precisione ed elimina gli effetti delle variazioni di temperatura e di umidità nel canale durante il trattamento endodontico.

Modulabile

Per un trattamento endodontico completo, basta collegare il Root ZX mini al tuo TriAuto mini.

Facile ed intuitivo

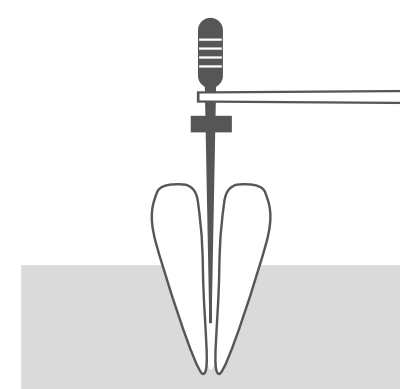
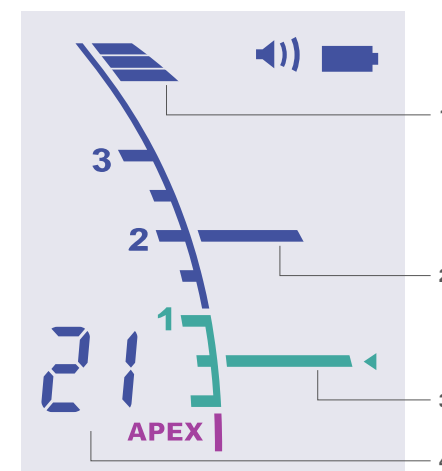


La misura si attiva quando lo strumento canalare entra nel canale radicolare: nell'angolo inferiore sinistro dello schermo compare il numero di barre restanti prima di arrivare alla barra lampeggiante verde.

1 – Barra per la visualizzazione della Posizione del file

2 – Barra blu di memoria

Questa barra può essere utilizzata per segnalare l'inizio di una curva pronunciata o una certa distanza dall'apice. Può essere molto utile come guida per cambiare lima durante l'allargamento. La barra di memoria potrà essere fissata solo quando è inserita la lima.

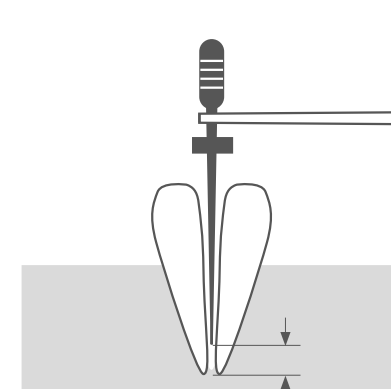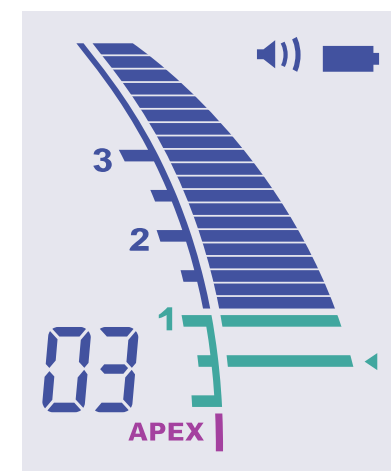

Quando la lima raggiunge una posizione prossima all'apice, la barra di progressione diventa verde per indicare che si è in prossimità dell'apice.



3 – Barra verde lampeggiante

Il punto di riferimento per la misura o l'allargamento può essere fissato su qualsiasi posizione tra la linea 2 e APEX.

4 – Le informazioni sul display

Durante la misura: viene indicato il numero di barre restanti prima di raggiungere la barra lampeggiante verde.

Quando non si misura: viene indicato il numero della memoria (01-02-03)

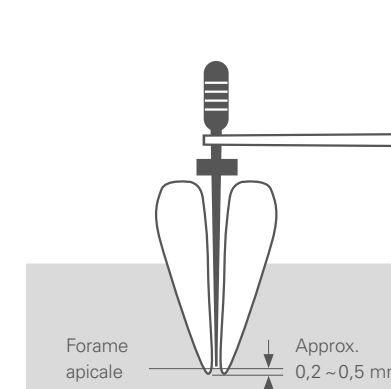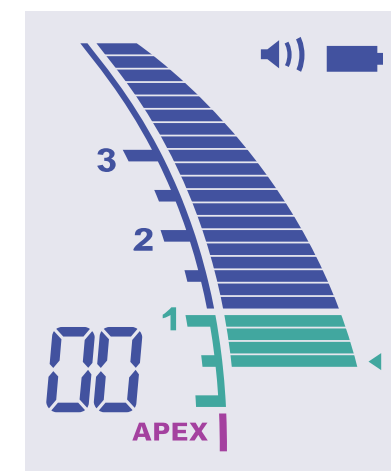

Quando la punta del file raggiunge la posizione preimpostata, la barra smette di lampeggiare e si ferma. Se questo valore viene superato, gli indicatori "APEX" e "◀" iniziano a lampeggiare.

0,5 come interpretare le misure

La lettura di 0,5 indica che la punta della lima è molto vicina al forame apicale.




Questo valore è usato per determinare la lunghezza di lavoro a seconda del singolo caso. La lunghezza esatta di lavoro dipende dalla forma e dalle condizioni del canale e deve essere valutata clinicamente dal dentista.

Accessori



Specifiche

Nome:	Root ZX mini
Modello:	RCM-7
Alimentazione:	DC 4,5 V
Potenza nominale:	0,2 W
Peso:	ca. 110 g
Pile:	1,5 VDC AAA x 3 (incluso)

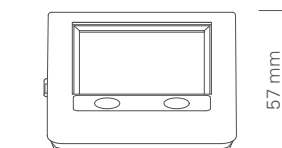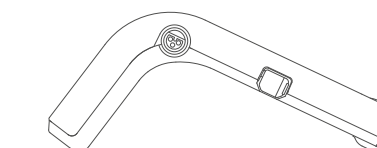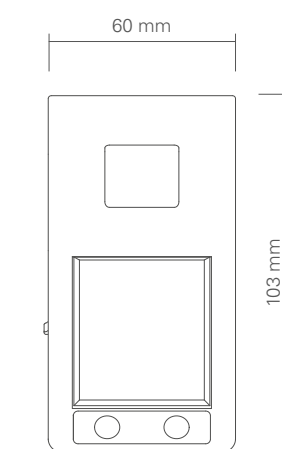

Ulteriori informazioni
su morita.de