


## 1 Sätt igång Tri Auto mini: Tryck på huvudströmbrytaren.

Displayen för vänteläge visas.

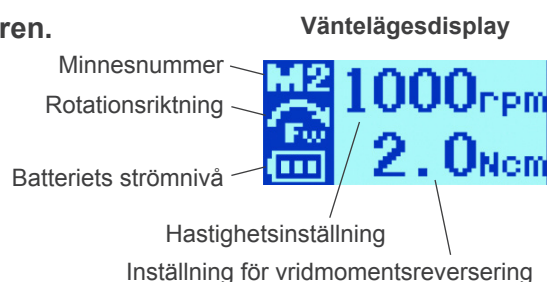

## 2 Välj minnesnummer: Tryck på plus- eller minusbrytaren.

\* De finns sex minnen.

Fabriksinställningarna visas nedan.


Inställning	Minne		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Hastighet "SPEED" (rpm)	400	400	250
Vridmomentsreversering "REV. TORQUE" (Ncm)	1.0	0.8	0.6

## 3 Starta motorn: Tryck på huvudströmbrytaren igen.

Displayen för vridmoment visas.

\* Om du håller nere huvudströmbrytaren när du startar motorn kommer den bara att arbeta medan brytaren hålls nere och stanna upp när brytaren släpps upp.

Torque Display

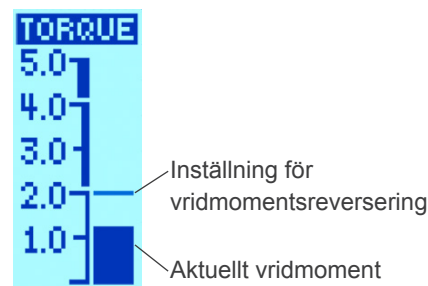

## 4 Stoppa motorn: Tryck på huvudströmbrytaren igen.

Displayen för vänteläge visas igen.