


1

De Tri Auto mini inschakelen: Druk op de hoofdknop.

Het stand-byscherm wordt geopend.

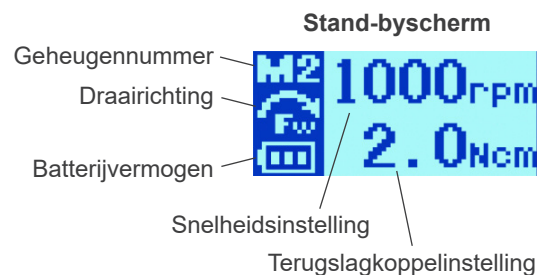

2

Geheugennummer selecteren: Druk op de plus- of minknop.

* Er zijn zes geheugens

De fabrieksinstellingen staan hieronder vermeld.

Instelling	Geheugen		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Snelheid (rpm)	400	400	250
Terugslagkoppel (Ncm)	1,0	0,8	0,6


3

Motor starten: Druk nog een keer op de hoofdknop.

Het koppelscherm wordt geopend.

* Als u de hoofdknop ingedrukt houdt, zal de motor alleen lopen zolang u deze ingedrukt houdt en stoppen wanneer u deze los laat.

Koppelweergave

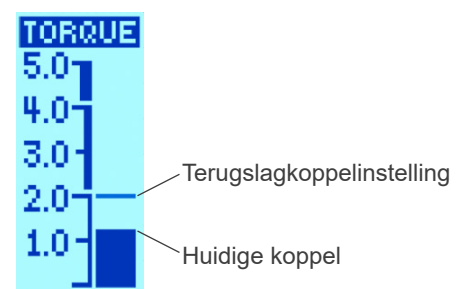

4

Motor stoppen: Druk nog een keer op de hoofdknop.

Het stand-byscherm wordt weer geopend.

