




* Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις συνοδευτικές Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Tri Auto ZX2+.
* Πάντοτε να φοράτε κατάλληλα γάντια όταν πραγματοποιείτε επανεπεξεργασία.

Πριν από τη Χρήση


Εξάρτημα Συναρμολόγηση

Βήμα 1
Σύνδεση Γωνιακής Χειρο-
λαβής

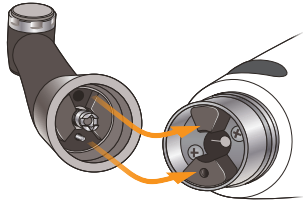


Βήμα 2

Περάστε το Προστατευτικό
Χιτώνιο HP

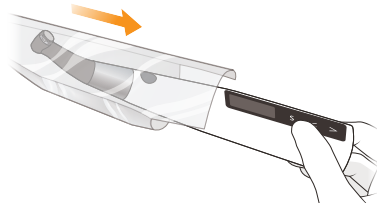


Βήμα 3

Σύνδεση Καλωδίου
Ανιχνευτή

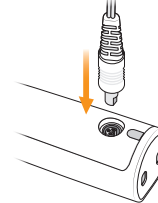


⚠️ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι το αντίθετο ηλεκτρόδιο (άγκιστρο) έχει συνδεθεί στον λευκό συνδετήρα του ανιχνευτή.

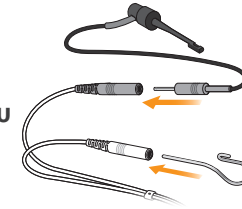

Βήμα 4

Εγκατάσταση Ρίνης

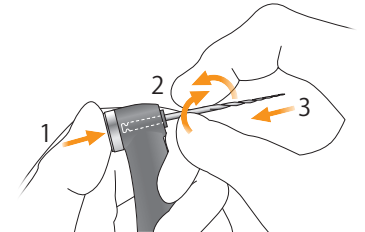

Έλεγχος Λει- τουργίας


Βήμα 1

Λειτουργία Εντοπισμού Ακρορριζίου

Ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Αγγίξτε το αντίθετο ηλεκτρόδιο (άγκιστρο) με τη ρίνη και το κλιπ στο άκρο της υποδοχής ρίνης. Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν όλες οι μπάρες ένδειξης στον μετρητή, στην οθόνη LCD.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ανάβουν οι μπάρες ένδειξης, διακόψτε άμεσα τη χρήση του οργάνου και φροντίστε για την επισκευή του από επαγγελματία.

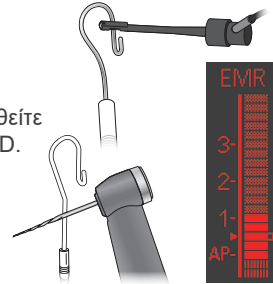


Βήμα 2

Περιστροφή Μοτέρ

Επιλέξτε «m2» (λειτουργία OGP2). Πιέστε τον Γενικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί ομαλά.

⚠️ Εάν το μοτέρ δεν περιστρέφεται κανονικά, ή παρατηρούνται ανπικανονικοί θόρυβοι ή κραδασμοί, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία της συσκευής και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή την J. MORITA OFFICE.

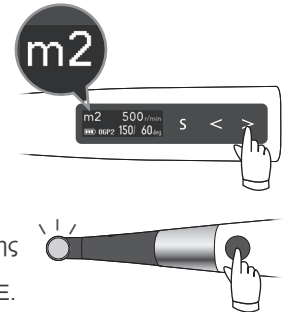

Ενεργοποίηση/Απενεργο- ποίηση

ON



OFF



Πιέστε παρατεταμένα

Βαθμονόμηση

(Πριν από την πρώτη χρήση μετά την αγορά, μετά την αντικατάσταση της γωνιακής χειρολαβής, εάν η ενέργεια OTR ενεργοποιείται σπασμωδικά ή τυχαία, κ.λπ.)

Συνδέστε την γωνιακή χειρολαβή. Με το όργανο απενεργοποιημένο, κρατήστε κάτω τον αριστερό διακόπτη ρύθμισης (<) και στη συνέχεια πιέστε το Γενικό διακόπτη.



Πιέστε τον δεξιό διακόπτη ρύθμισης (>) για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση. Μετά τη βαθμονόμηση, το όργανο επιστρέφει αυτόματα στην οθόνη αναμονής.



Έλεγχος με Δοκιμαστικό Εργαλείο (μία φορά την εβδομάδα)

Ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Συνδέστε το δοκιμαστικό εργαλείο. Ελέγξτε την ένδειξη του μετρητή.

- Εάν στον μετρητή ανάψουν έως δύο μπάρες από την μπάρα αριθμός 1: Φυσιολογικό
- Εάν στον μετρητή ανάψουν έως δύο μπάρες, περισσότερο ή λιγότερο, από την μπάρα αριθμός 1: Διακόψτε άμεσα τη χρήση του οργάνου και φροντίστε για την επισκευή του από επαγγελματία.

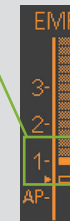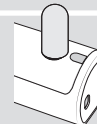

Ρυθμίσεις οθόνης


Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

☞ Συμβουλευθείτε τις συνοδευτικές Οδηγίες Χρήσης, ενότητα «Άλλες Λειτουργίες Χειρολαβής».

Κυρίαρχο Χέρι




Κατεύθυνση Οθόνης EMR

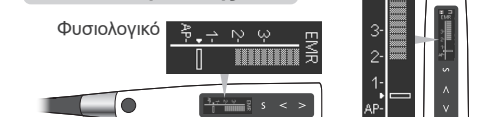

Επανεπεξεργασία - μετά από κάθε χρήση


Μετά τη Χρήση

Βήμα 1
Απενεργοποίηση

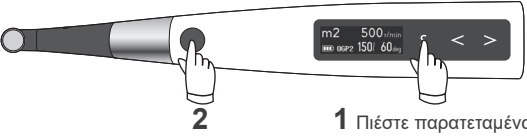


2 1 Πιέστε παρατεταμένα

Βήμα 2
Αφαιρέστε τη Ρίνη

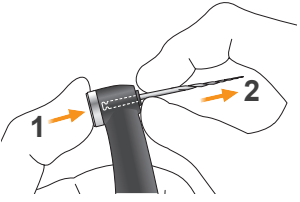


1 2

Βήμα 3
Αφαιρέστε το Προστατευτικό Χιτώνιο HP



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μη επαναχρησιμοποιείτε το προστατευτικό χιτώνιο HP.

Βήμα 4
Φορτίστε τη Μπαταρία




Αποστείρωση

Εξαρτήματα προς αποστείρωση

- Υποδοχή Ρίνης
- Αντίθετο Ηλεκτρόδιο
- Μακριά Υποδοχή Ρίνης
- Γωνιακή Χειρολαβή
- Υποδοχή Χειρολαβής*
- Εξωτερικό Ηλεκτρόδιο Ρίνης (με καπάκι)*

Βήμα 1
Προεπεξεργασία

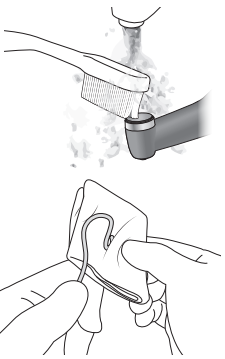


Βήμα 2
Καθαρισμός και απολύμανση

Συνθήκες λειτουργίας για Πλυτήρια-Απολυμαντές

Όνομασία Μονάδας	Miele G7881
Λειτουργία	Vario TD (χρόνος καθαρισμού: 5 λεπτά)
Απορρυπαντικό (συγκέντρωση)	neodisher MediClean (0,3% έως 0,5%)
Ξέπλυμα (συγκέντρωση)	neodisher MediKlar (0,03% έως 0,05%)

Βήμα 3
Λίπανση
(μόνο για τη γωνιακή χειρολαβή)


Λιπάνετε την γωνιακή χειρολαβή με LS OIL. Σκουπίστε τυχόν πλεόνασμα λαδιού από τη γωνιακή χειρολαβή.



Βάλτε 5 σταγόνες από το LS OIL εδώ και περιμένετε 10 λεπτά.

1 Σταγόνα 1 Σταγόνα

Βήμα 4
Συσκευασία



Βήμα 5
Αποστείρωση

Σύσταση:
Χώρα: ΗΠΑ

Τύπος αποστειρωτή	Θερμοκρασία	Χρόνος (λεπτά)	Χρόνος στεγνώματος μετά την αποστείρωση (λεπτά)
Βαρύτητα	+132 °C	15	15
	+121 °C	30	

Χώρα: Εκτός ΗΠΑ


Δυναμική Αφαίρεση Αέρα	Θερμοκρασία	Χρόνος (λεπτά)	Χρόνος στεγνώματος μετά την αποστείρωση (λεπτά)
Βαρύτητα	+134 °C	3	10
	+134 °C	5	
Βαρύτητα	+134 °C	ελαχ. 6	10
	+121 °C	ελαχ. 60	

Απολύμανση

Εξαρτήματα προς αποστείρωση

- Μηχανοκίνητη Χειρολαβή
- Καλώδιο Ανιχνευτή
- Φορτιστής Μπαταρίας
- Ράβδος Οδηγός
- Δοκιμαστικό


Βήμα 1
Προεπεξεργασία



Βήμα 2
Καθαρισμός και απολύμανση

Απολυμαντικά Εγκεκριμένα από την J. MORITA MFG. CORP.

Απολυμαντικό	Χώρα
Αιθανόλη (70 vol% έως 80 vol%)	ΗΠΑ
Opti-Cide3 (πανάκια)	
FD366 sensitive (πανάκια)	Εκτός ΗΠΑ

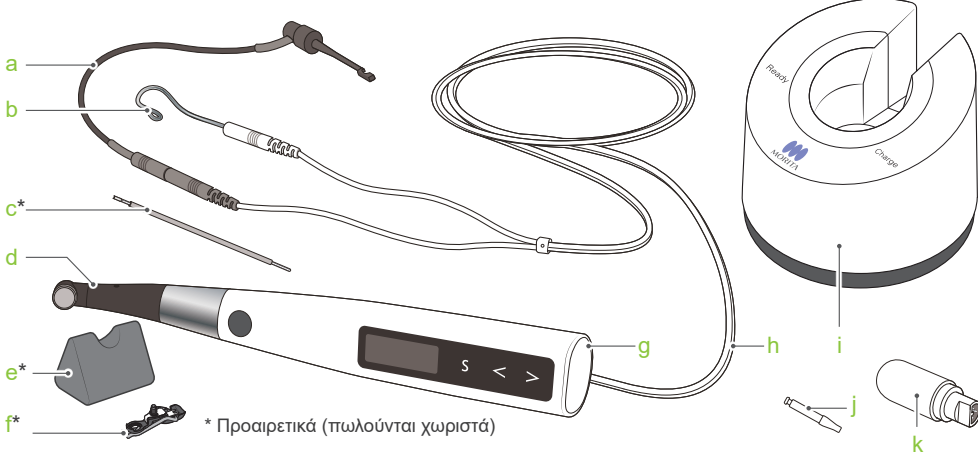

a, b, c*, d, e*, f*, g, h, i, j, k

* Προαιρετικά (πωλούνται χωριστά)

Εμπορικά Σήματα και Καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα: Τμήματα των ονομασιών των εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνουν είτε εμπορικά σήματα είτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην κάθε εταιρία.