


1

Allumer le Tri Auto mini : Appuyer sur l'interrupteur principal.

L'écran de veille s'affiche.

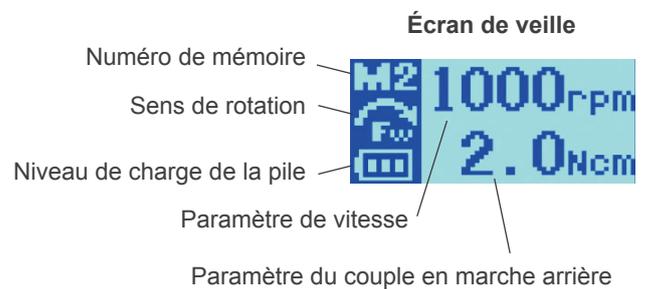

2

Choisir un numéro de mémoire : Appuyer sur le bouton Plus ou Moins.

* Il y a six mémoires.

Les paramètres d'usine sont indiqués ci-dessous.

Paramètre	Mémoire		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Speed (t / min) (Vitesse)	400	400	250
Torque reverse (Ncm) (Couple en marche arrière)	1.0	0.8	0.6


3

Démarrer le moteur : Appuyer de nouveau sur l'interrupteur principal.

L'écran du couple s'affiche.

* Si l'interrupteur principal est maintenu enfoncé lors de la mise en marche du moteur, celui-ci tourne uniquement pour la durée de la pression et s'arrête dès relâchement de l'interrupteur.

Écran de couple

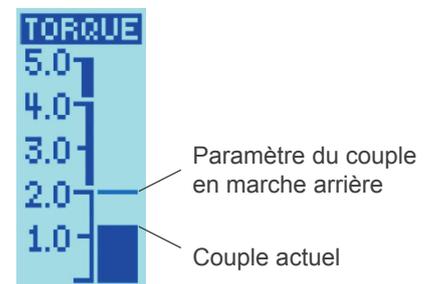

4

Arrêter le moteur : Appuyer une nouvelle fois sur l'interrupteur principal.

L'écran de veille s'affiche de nouveau.

