

Signo T100

シグノ



Thinking ahead. Focused on life.

Excellent Design

Studio F. A. Porscheの卓越したデザイン

signo T 100

Technology meets Aesthetics

The new Signo T100 is based on a clear architectural structure evolving from the Signo T500 premium model with an individual pantograph lifting mechanism seat design. The new Signo T100 represents an uncompromised result of the Morita DNA.

- Timeless design.
- Sophisticated manufacturing quality.
- Solidity, reliability and longevity.

The new Signo T100 encompasses ideally the general design philosophy of Studio F. A. Porsche with the professional standards of Morita. It offers simple functionality and ease of maintenance, and its pure white body color blends in with the space and brings a sense of calmness.



細部に息づく明確なアーキテクチャに基づき、プレミアムモデルSigno T500から継承した高いデザインと独自のメカニズム。モリタDNAの妥協のない結果を導き出す。それがSigno T100

- 時代を超越したデザイン
- 洗練された製造品質
- モリタの信頼性と耐久性

Signo T100は、Studio F. A. Porscheのデザイン哲学と、モリタのもの造りへのこだわりが調和。シンプルな機能性とメンテナンスの容易性を実現し、ピュアホワイトのボディカラーは空間に溶け込み、落ち着きをもたらします。



Simplicity and Performance

シンプルさと性能の両立



パンタグラフ式昇降

世界でも多く採用されているパンタグラフ式昇降機構のカンタータイプシートを装備。足を前に伸ばせるので、長時間の診療でも疲れにくく、患者さんの体への負担を軽減します。



最低位400mmで乗り降り安心

ご高齢者や小児の患者さんも安心して乗り降りできるよう最低位400mmを採用しました。



ルナビュー TSで快適な視界

LED1灯式のルナビュー TSは、長寿命、省エネでありながら30,000ルクスの明るさを実現。照度は4段階調整で、術者の快適な視界を確保できます。オプションのタッチレスセンサーでは、直接手で触れることなく点灯が可能です。



清掃性に優れたホルダー

固定式の差し込みホルダーは、清掃しやすいシンプル設計。



スウィングモデル

デュアルバランスアームシステムを搭載。診療時の負担となるインスツルメントの重さを軽減します。また、チューブをフロアから浮かせた状態で操作できるため衛生的です。



負担の少ないフットコントローラー

角度の低い踏み込み部は、長時間の診療でも足首が疲れにくい設計。チェアマニュアルレバーは直感的で操作性に優れています。足先で移動できるペダルガードをオプションにて追加可能です。



操作性の高いヘッドレスト

シンプルな機構により操作性に優れたヘッドレスト。頭部をホールドする形状で、治療中の揺れを防ぎます。オプションにて2軸式を選択することも可能です。



スムーズな動きのテーブル

ホルダー一体式テーブルは、回転中心をテーブルのセンター位置に近づけることにより、軽い力でスムーズな動きを実現しました。



ベースン洗浄機能

コップ給水と連動して、自動でベースンの洗浄を行います。スイッチ操作でベースンのマニュアル洗浄、連続洗浄が可能です。

Easy Maintenance

容易なメンテナンス性で衛生管理を強化



フラッシング装置 (オプション)
各管路内の残留水を排出。フラッシングアダプターはユニット内に収納可能です。



カットフィルター
毎日清掃するカットフィルターは、アクセスしやすいアシスタント側のホルダー裏に配置しています。



クリーンウォーターシステム リセオ (オプション)
水の衛生環境を維持するため、送水過程で失われた有効塩素を追加注入することで適正な遊離塩素濃度まで高めて、歯科用ユニット内の水の清浄を保ちます。



除菌カートリッジ (オプション)
多孔質中空糸膜で、水回路の微生物などを捕え、クリーンなエアと水を供給します。




給水管路クリーンシステム (オプション)
専用洗浄液を管路内に滞留させ、夜間、休日の間もよりクリーンに保ちます。

Swing Arm

スウィングアーム

インストゥルメントの重さによる手首への負担を軽減
縦位置でもスウィングアームのバランスをとるデュアルバランスアームシステムを搭載。手首への負荷を軽減し、スムーズな診療を実現します。

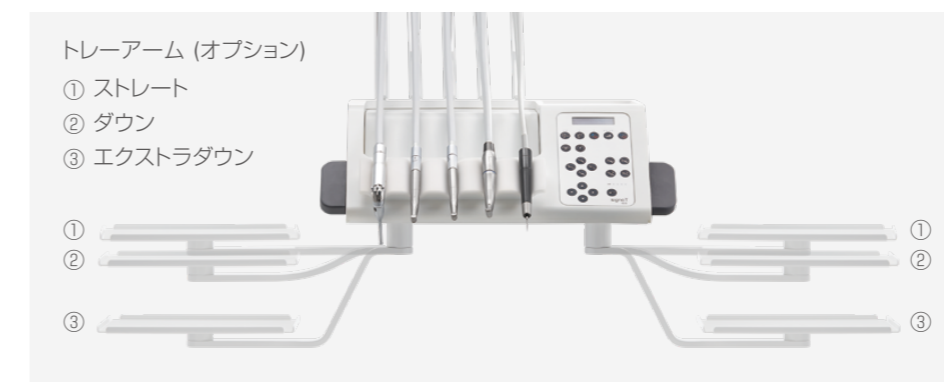

トレーアーム (オプション)
① ストレート
② ダウン
③ エクストラダウン



スタンダードトレー (オプション)



ワイドトレー (オプション)

自由に選べる診療スタイル
補助トレーは大小2つのサイズから、設置位置は3パターンから選択できるため、多彩な診療スタイルに対応が可能です。

Equipment

イクイップメント (オプション)



超音波スケーラー
ソルフィー Tタイプ (LED)
ソルフィー Fタイプ (LED)
ニュートロン (LED)




バキュームシリンジ
ロータリー式バキュームシリンジ
手元スイッチ式バキュームシリンジ
サライバエジェクター



水カチット
エアーカチット



ルナビュー TL2
EL ミラー

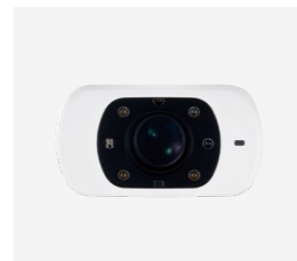

ルナビューショット2



小物テーブル
ペーパーホルダー



マウストレー
(オーバーアームのみ)



ガスバーナー
(オーバーアームのみ)



別置式配管ピット



術者側アームレスト
アシスタント側アームレスト



サイドハンドル
(スウィングモデルのみ)



フロントハンドル
(スウィングモデルのみ)

Variation

バリエーション



Over Arm



Swing Model

Operating Stool

オペレーティングスツール




オペレーティングスツール T2
背もたれ・ひじ掛け兼用部分が、腰かけたまま自在に回転。
すばやく安定した体勢をとることができます。


Colors




Lamb (T-WH)

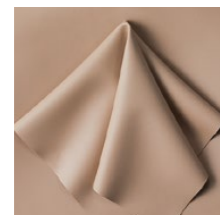


Clay (T-BE)

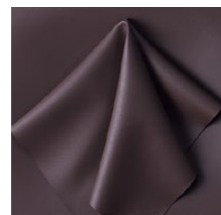


Caribou (T-BR)

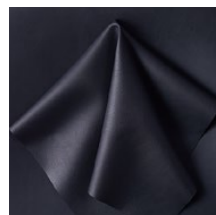


Black (T-BK)

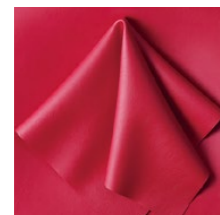


Deep Red (T-RE)

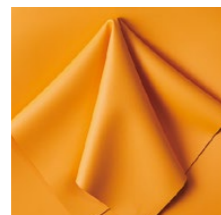


Soleil (T-OR)

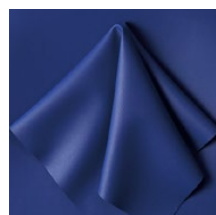

Night Sky (T-BL)

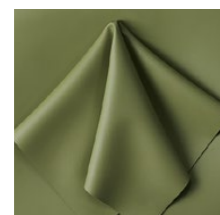


Aloe (T-GR)

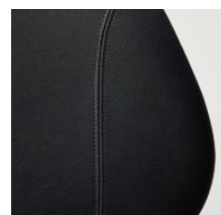




ラグジュアリーシート
(オプション 各色対応可)

Specifications

カウンタータイプ, Over Arm

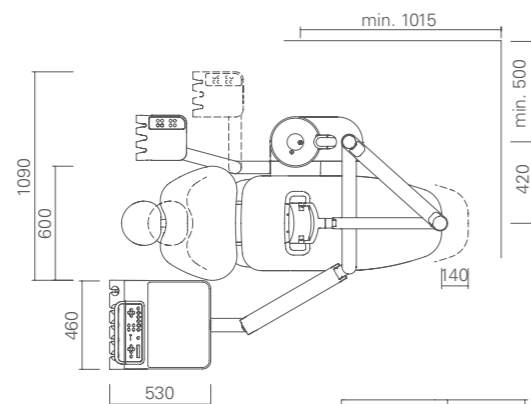

カウンタータイプ, Swing Model

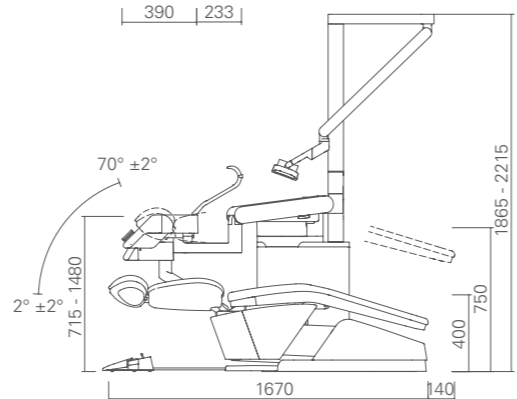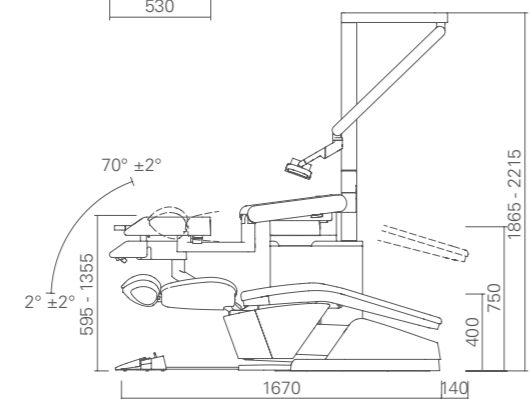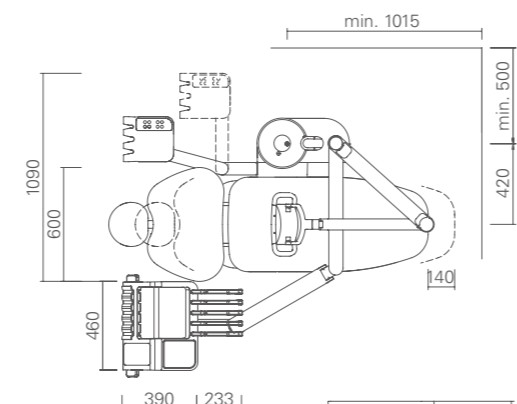

装備	
ツインパワータービンp (LEDライト付)	●
タービン可変速装置	△
クリーンエアシステム	△
マイクロモーター トルクスTR-S3	●
マイクロモーター トルクスTR-S3-O (LEDライト付)	△
トルクテック ST-DH	●
トルクテック CA-DC	●
超音波スケーラー ソルフィーTタイプ (LEDライト付/ライト無)	△
超音波スケーラー ソルフィーFタイプ (LEDライト付/ライト無)	△
超音波スケーラー ニュートロン (LEDライト付/ライト無)	△
スリーウェイシリンジ WS201	●
スリーウェイシリンジ WS-100K	△
ライト付きスリーウェイシリンジ WS-100K-LD (LEDライト付)	△
バキュームシリンジ VS110 (Φ16, 吸引量調整付)	●
ロータリー式バキュームシリンジ VS110R (Φ16, 吸引量調整付)	△
手元スイッチ式バキュームシリンジ VS112 (Φ16)	△
サライバエジェクター SE110 (吸引量調整付)	△
バキュームセントラル式 (バキュームタンクなし, EV立上りシャットオフバルブなし)	●
バキュームタンクセパレーター式	△
別置き配管ビット	△
2軸式ヘッドレスト	△
フットコントローラー	●
ペダルガード	△
コードレスフットコントローラー	△
ルナビューTS	●
ルナビューTL2	△
ELミラー (ルナビューTL2のみ)	△
オペレーティングライト用タッチレスセンサー	△
ルナビューショット2 (ルナビューTL2のみ)	△
オペレーティングライト2段アーム	●
オペレーティングライト3段アーム	△
テーブル部 タクトスイッチ式コントロールパネル	●
ガスバーナー Tバーナ *1	△
マウストレー *1	△
口腔内カメラ ペンビュー VIS-USB 組込み *1	△
液晶モニターアーム (ライトポール取付タイプ)	△
タブレットスタンド *1	△

装備	
トリプルビュー LED *1	△
除菌カートリッジ (水・エア)	△
術者側アームレスト	△
アシスタント側アームレスト	△
小物テーブル	△
ペーパーホルダー	△
フリーマウントバキューム フリーアーム・アルテオ (給水管路クリーンシステムと併用不可)	△
フリーマウントバキューム フリーアーム・シーテクト (給水管路クリーンシステムと併用不可)	△
フリーアーム・パブリライザー	△
クリーンウォーターシステム リセオ	△
給水管路クリーンシステム (フリーマウントバキュームと併用不可)	△
フラッシング装置	△
モリタオンラインサービスWi-Fi接続機能 (DOOR Link)	△
ラグジュアリーシート	△
術者側5連式インストルメントホルダー (差込固定式)	●
汚物ホルダー *1	△
オート位置制御 4ポジション	●
オートフィルター給水 (紙コップ対応光センサー / ベース自動洗浄付)	●
ワンタッチ接手 (給水)	△
ワンタッチ接手 (給気)	△
オペレーティングスツールT2	△

*1. スウィングモデルには装備不可 ●: 標準装備 △: オプション

スウィングモデル専用オプション	
スリーウェイシリンジ WS90P (術者側)	●
サイドハンドル	△
フロントハンドル	△
ストレートアーム+スタンダードトレイ *2	△
ストレートアーム+ワイドトレイ *2	△
ダウンアーム+スタンダードトレイ *2	△
ダウンアーム+ワイドトレイ *2	△
エクストラダウンアーム+スタンダードトレイ *2	△
エクストラダウンアーム+ワイドトレイ *2	△
術者側シリコンシート	△
汚物ホルダー (卓上タイプ)	△

*2. シリコンシート付き ●: 標準装備 △: オプション

シグノT100
 名称: シグノ T100
 型式: チェアマウント: TUA20
 電源電圧: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 1.0kVA
 チェア昇降方式: パンタグラフ式
 シート座面高さ (床面より): 最低位 400mm 最高位 750mm
 バックシート角度 (水平に対して): 最起立 70° 傾斜 2° (単動シリンダー)
 質量: 約 250kg

一般的名称: 歯科用ユニット
 販売名: シグノ T 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 特定保守管理医療機器
 医療機器認証番号: 229AKBZX00081000 法定耐用年数 (償却年数) 7年

製造販売業者: 株式会社モリタ東京製作所
 所在地: 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129番地
 販売名: ルナビュー TS 一般的名称: 汎用歯科用照明器
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 11B2X00071000043
 販売名: ルナビュー TL2 一般的名称: 汎用歯科用照明器
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 11B2X00071000049
 販売名: ルナビューショット2
 一般的名称: 歯科用口腔内カメラ, 手術用顕微鏡, 可搬型手術用顕微鏡
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 特定保守管理医療機器
 届出番号: 11B2X00071000048
 販売名: スリーウェイシリンジ 一般的名称: 歯科用口腔洗浄器
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 11B2X00071000009

製造販売業者: 株式会社モリタ製作所
 所在地: 京都府伏見区東浜南町680番地
 販売名: ツインパワータービンp 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 21200BZZ00035000
 販売名: トルクス 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 229ACBZX00020000
 販売名: トルクテック 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 221ACBZX00074000
 販売名: ソルフィー (組込み式) 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 223ACBZX00038000
 販売名: ライト付きスリーウェイシリンジ 一般的名称: 歯科用シリンジ
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 26B1X00001000036
 販売名: スリーウェイシリンジ 一般的名称: 歯科用シリンジ
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 26B1X00001000037

製造販売業者: 白水貿易株式会社
 所在地: 大阪府大阪市淀川区新高1丁目1番15号
 販売名: ニュートロンモジュールキット 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 224ALBZX00038000

製造販売業者: 株式会社東京技研
 所在地: 東京都世田谷区玉堤1丁目25番13号
 販売名: フリーアームアルテオ 一般的名称: 歯科用吸引装置
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 222AHBZX00018000
 販売名: フリーアームシーテクト 一般的名称: 歯科用吸引装置
 機器の分類: 管理医療機器 (クラスII) 認証番号: 304AHBZX00013000

製造販売業者: 株式会社フェニックスデント
 所在地: 栃木県佐野市亀井町2649-3
 販売名: Tバーナ 一般的名称: 歯科用バーナ
 機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 届出番号: 09B3X10010000002

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic Systems

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020(フリーコール)
(歯科医療従事者様専用)

株式会社 モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129 〒362-0806 T 048. 723 2621

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
このカタログに記載されている社名又は商品名は(株)モリタ、(株)モリタ東京製作所の保有する商標又は登録商標です。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。
カタログ掲載写真は、一部オプションを含みます。

PUB.NO.M6884.3.2410.5,000IYP/JPC/JPC 208550102



詳細はこちら

シグノ T100

<https://www.dental-plaza.com/qr/884>



製品についてのお問合せはこちらから

<https://www.dental-plaza.com/qr/120>

